

シャワートイレ New J シリーズと 組み合わせてお使いの方へ

【該当品番：CW-J130, J131, J110, J111型】

おしリフトはシャワートイレ本体を傾けて昇降させるため、使い方によってはシャワートイレが破損したり、正常に働かない恐れがあります。下記の注意を守って正しくご使用ください。

注 意

＜その1＞


便フタを外し、便座ストッパー(別売品)を取り付けてください。

※ 便座ストッパーを取り付けないと、便座の電動開閉機能が破損したり、便座が電動開閉しない原因になります。

⚠ 注意

便フタを外して使用してください。

※ 便座の上昇時、便フタが倒れてケガをする恐れがあります。

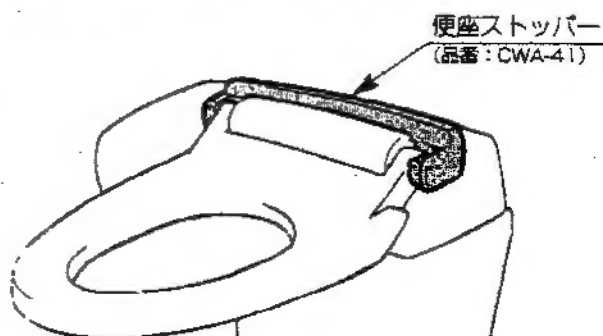


便座ストッパーの購入方法は取扱説明書の「別売品のご案内」をご覧ください。

＜その2＞

昇降中に便座開閉スイッチを押さないでください。

※ 便座の電動開閉機能が破損する原因になります。

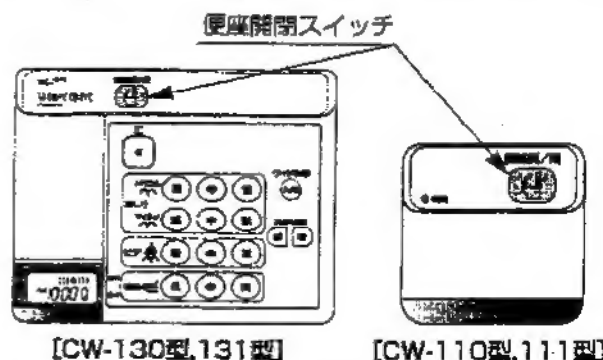

【CW-J130型, J131型】

【CW-J110型, J111型】

＜その3＞

ノンタッチ開閉スイッチを「切」にしてご使用ください。

※ ノンタッチ開閉スイッチが「入」になっていると、便座が電動開閉しないことがあります。

